


CABO KEELER, TAMANHO C



LEIA E SIGA CUIDADOSAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES

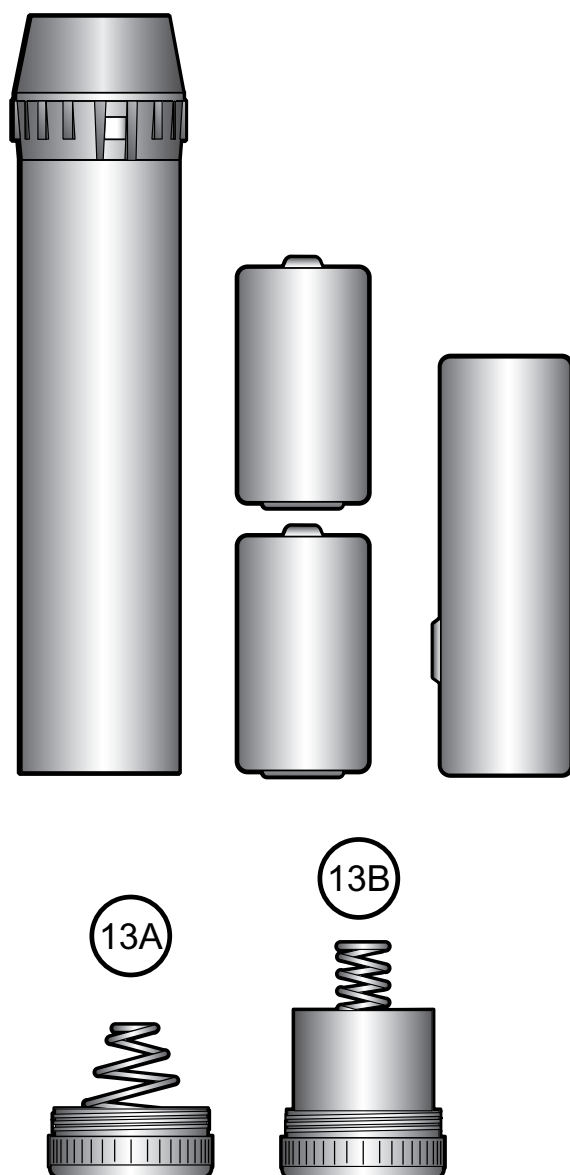

Cabo Keeler, tamanho C

Leia atentamente esta secção de instruções antes de utilizar o produto Keeler. Para a sua segurança e a dos clientes, siga todas as informações fornecidas nesta secção. As informações seguintes destinam-se a realçar os potenciais riscos de segurança que podem estar associados a uma má utilização ou dano.

Atenção



Este produto não pode ser utilizado na presença de gases inflamáveis.

Não desmonte nem modifique a bateria. Não existem peças no interior que possam receber assistência.

Não elimine a bateria no fogo. Não perfure.

Não utilize uma bateria que esteja deformada, corroída, visualmente danificada ou que esteja a verter.

Se o produto emanar um odor estranho, calor ou fumo, interrompa a utilização imediatamente. A utilização continuada de um produto ou peça danificados pode causar ferimentos.

Não mergulhe a unidade em qualquer líquido.

Não utilize a unidade se estiver danificada e, periodicamente, efectue uma inspecção visual de sinais de dano.

Apenas os cabos Keeler, com uma base vermelha, podem ser utilizados no carregador Keeler. Não tente inserir um cabo Keeler com base azul em carregadores Keeler. Consultar identificação dos cabos e lâmpadas Keeler.

Cuidado

Retire as baterias de células secas antes de longos períodos de armazenagem.

Utilize apenas baterias recarregáveis Keeler Pt. No. 1919-P-7069.

Carregue utilizando carregadores Keeler.

Não misture diferentes tipos de baterias.

Não carregue baterias num ambiente em que a temperatura possa exceder os 40°C ou ficar abaixo de 0°C.

Manter fora do alcance de crianças.

Não ligue a uma tomada eléctrica danificada.

Apenas para utilização no interior (proteger da humidade)

Para evitar a condensação, deve colocar o instrumento à temperatura ambiente antes da utilização.

Ao ligar os cabos às cabeças dos instrumentos, verifique se a voltagem das lâmpadas corresponde à voltagem do cabo.


Certifique-se de que o controlo se encontra na posição off (desligado) quando concluir o exame.

Quando substituir a célula de recarregáveis , retire o cabo e insira a nova célula. Substitua a tampa inferior e coloque o cabo no carregador.

Ambiente


Elimine a bateria de acordo com a legislação local sobre a reciclagem de baterias.

Coloque fita adesiva nos contactos da bateria de forma a evitar curtos circuitos durante a eliminação.

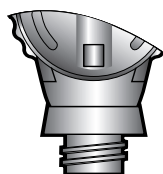


Ligação da cabeça dos instrumento ao cabo


A ligação entre a cabeça do instrumento e o cabo é uma rosca. Para ligar a cabeça do instrumento, instale-o como apresentado e rode no sentido dos ponteiros do relógio. Certifique-se de que a ligação entre a cabeça e o cabo é positiva.

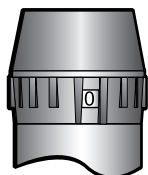

OFF

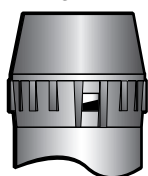

MELA CARGA

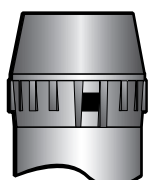

CARGA TOTAL

Compatibilidade

Os retinoscópios e os oftalmoscópios Specialist, Professional, Standard e Practitioner são compatíveis com os Keeler Vista 2,8v e cabos Keeler 3,6v.

Ligar/desligar o controlo de intensidade

Para ligar o instrumento, rode o controlo de intensidade como indicado para a direita. Para desligar o instrumento, rode o controlo de intensidade como indicado para a esquerda. Os cabos Keeler, tamanho C, possuem um indicador de potência. Mostra se o aparelho está ligado ou desligado.

Vermelho = Ligado Prateado = Desligado

Identificação do cabo

Os cabos Keeler, tamanho C, possuem um código de cores para permitir a distinção entre um cabo de baterias secas (2,8v) e um cabo recarregável (3,6v). O código de cores é o seguinte:

Base azul	=	2,8v para baterias secas	13A
Base vermelha	=	3,6v para baterias recarregáveis	13B

As lâmpadas Keeler possuem um código de cores semelhante.

Base azul	=	2,8v para baterias secas
Base vermelha	=	3,6v para baterias recarregáveis

Quando substituir as baterias e as lâmpadas, certifique-se de que a voltagem corresponde ao cabo. Elimine as baterias usadas de forma segura de acordo com os regulamentos locais.



Inserir/Substituir baterias

Desenrosque a tampa das baterias, coloque as baterias e volte a colocar a tampa, como apresentado. Devem ser utilizadas as seguintes baterias secas: **Cabo Keeler, tamanho C** - 2 x 1,5v tamanho C pilhas - Duracell MN 1400 ou equivalentes.

Tenha em atenção que os cabos recarregáveis são, habitualmente, fornecidos com uma bateria recarregável. (3,6v - 0,7 Ah Ni-Cd)

Actualização de Cabos de pilhas para recarregáveis

O cabo Keeler 2,8v tamanho C (base azul) cabo de pilhas de células secas pode ser actualizado para um cabo recarregável de 3,6v (base vermelha). Para obter os números de peças, consulte a secção de acessórios.

Tenha em atenção que a lâmpada de 2,8v do instrumento também tem de ser substituída por uma de 3,6v. Para obter informações mais detalhadas, consulte o Serviço de apoio Keeler, com o número 01753 857177.

Instruções De Carregamento Para Cabos Recarregáveis Keeler, tamanho C



Atenção

Não tente carregar pilhas não recarregáveis

Acondicionamento das pilhas

As pilhas recarregáveis Keeler têm de ser acondicionadas para assegurar a duração máxima do produto. Siga as instruções de acondicionamento indicadas.

Passo 1

Carregue completamente a nova bateria recarregável Keeler. Demora cerca de 15 horas.

Passo 2

Utilize o instrumento SEM O CARREGAR ATÉ QUE A BATERIA ESTEJA COMPLETAMENTE DESCARREGADA.

Passo 3

Quando estiver descarregada, carregue a bateria até ficar completamente carregada. Demora cerca de 15 horas.

Repita os passos 1, 2 e 3 três vezes, ou seja, carregue e descarregue completamente a bateria três vezes para concluir o processo de acondicionamento.

Assim que acondicionar as baterias como descrito acima, pode colocar o instrumento no carregador quando não estiver a ser utilizado.

Compatibilidade do carregador

Os cabos recarregáveis Keeler podem ser utilizados nos carregadores Keeler seguintes:

Carregadores Vista (simples, duplo, móvel)

Mini-carregador Keeler

Carregador Keeler Duo

Certifique-se de que utiliza uma das fontes de alimentação apresentadas na lista.

Carregadores de outras marcas



Atenção

Carregue apenas o cabo Keeler com um carregador que forneça corrente limitada de 65 mA.



Os cabos recarregáveis Keeler, tamanho C, podem ser utilizados com muitos carregadores. Para carregar o instrumento num carregador que não seja da Keeler, certifique-se antecipadamente de que possui corrente limitada de 65 mA. Em seguida, retire o centro da tampa da base, utilizando uma moeda. O cabo Keeler pode, agora, ser recarregado num carregador de outro fabricante.

Instruções de limpeza

Para este instrumento, só deve ser utilizada a limpeza manual, sem mergulhar, como descrito abaixo:

1. Limpe a superfície externa com um absorvente limpo, pano macio humedecido com água/solução detergente (2% de volume) ou água/álcool isopropílico (70% por volume).
2. Certifique-se de que a solução em excesso não entra para o instrumento. Tenha cuidado para se certificar de que o pano não está saturado com solução.
3. As superfícies devem ser cuidadosamente secas à mão, utilizando um pano macio e limpo.
4. Elimine com segurança os materiais de limpeza utilizados.

Garantia e Assistência

Não existem peças que possam ser substituídas pelo utilizador – qualquer acção de manutenção preventiva e assistência tem de ser efectuada por representantes autorizados da Keeler.

Os cabos Keeler tem uma garantia de 3 anos e será substituído ou reparado gratuitamente de acordo com o seguinte:

1. Qualquer falha deve-se a defeito de fabrico
2. A prova de compra acompanha qualquer reclamação.

FABRICADO NO R.U. POR:

Keeler Limited

Clewer Hill Road

Windsor

Berkshire SL4 4AA

Inglaterra

Tel: +44 (0)1753 857177

Fax: +44 (0)1753 857177

LINHA VERDE: 0800 521 251

DISTRIBUÍDO POR:

Keeler Instruments Inc

456 Parkway

Broomall

PA 19008, EUA

Número verde: 1 800 523 5620

Tel: 610 353 4350

Fax: 610 353 7814

A marca CE deste ☐
produto indica que foi ☐
testado e está em ☐
conformidade com as ☐
provisões da Directiva ☐
sobre Dispositivos ☐
Médicos 93/42/CEE



— A —
HALMA GROUP
C O M P A N Y



Distribuidor